




自动气袋清洗机 ABC620

气袋清洗效率能手
Efficient Expert for
Airbag Cleaning

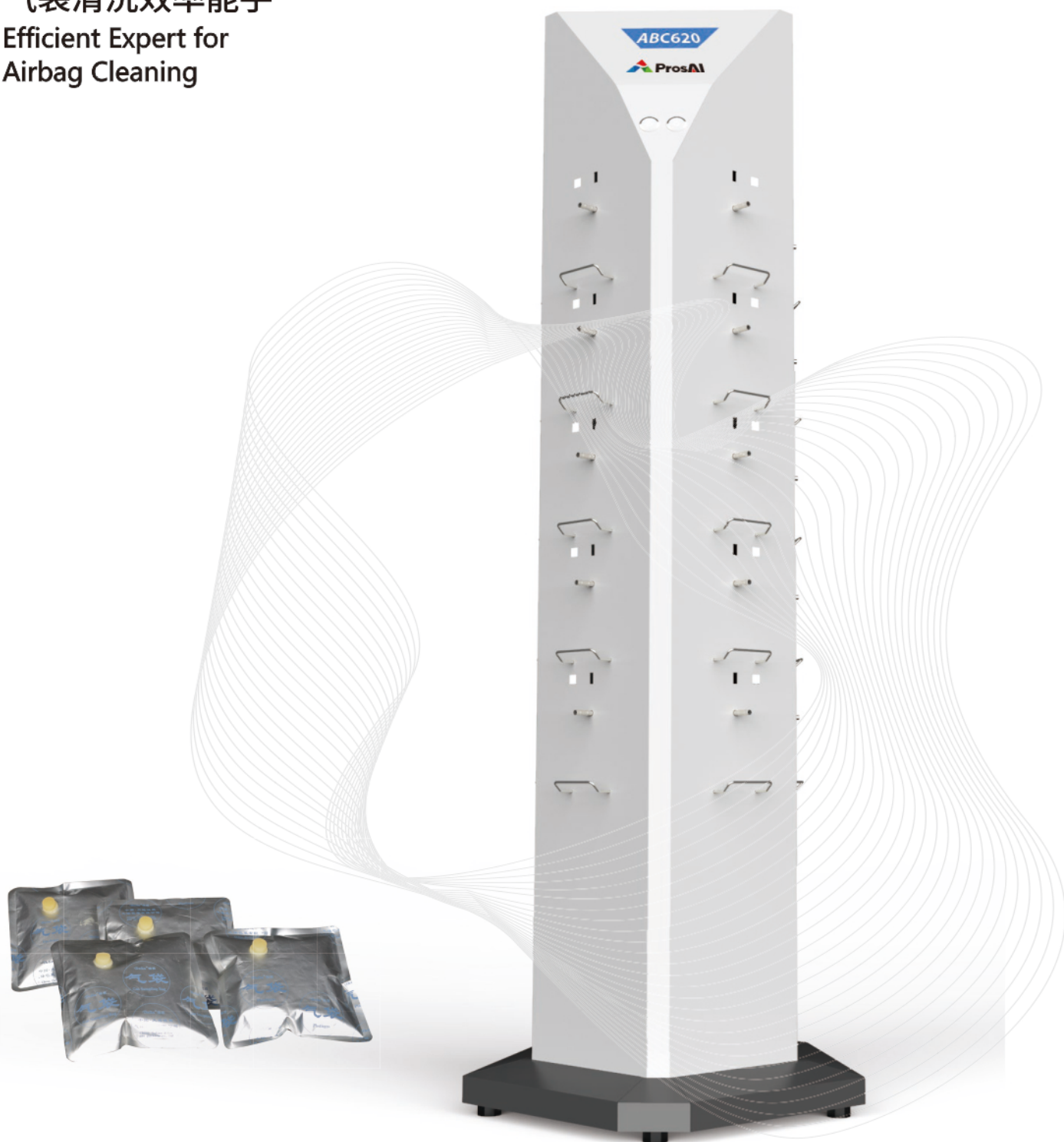

气袋清洗的革命

ABC620 可同时自动清洗 20 个气袋，快插式设计方便快捷，节省人力，极大提高实验室气袋清洗效率。

当前使用采样气袋的方法标准或规范，包括且不仅限于下表内容：


序号	标准
1	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 (HJ 38-2017)
2	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 -气相色谱法 (HJ 604-2017)
3	环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 (HJ 1012-2018)
4	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定气袋采样 -气相色谱法 (HJ 1006-2018)
5	固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 (HJ 732-2014)

清洗效果好，残留低于检出限

全惰性化气路，具有清洗气加热功能、流路加热功能以及气袋加热功能，确保清洗干净、残留低于检出限。

满足标准 (HJ 38-2017等) 中对于气袋清洗的质量控制要求。

注：所有气袋均使用Teldar聚氟乙烯气袋；清洗气采用高纯氮气；75%酒精、正己烷是注入的液体，然后在烘箱中60°C平衡2h测定；清洗后的气袋，均是注入脱烃空气室温放置24h后测定。

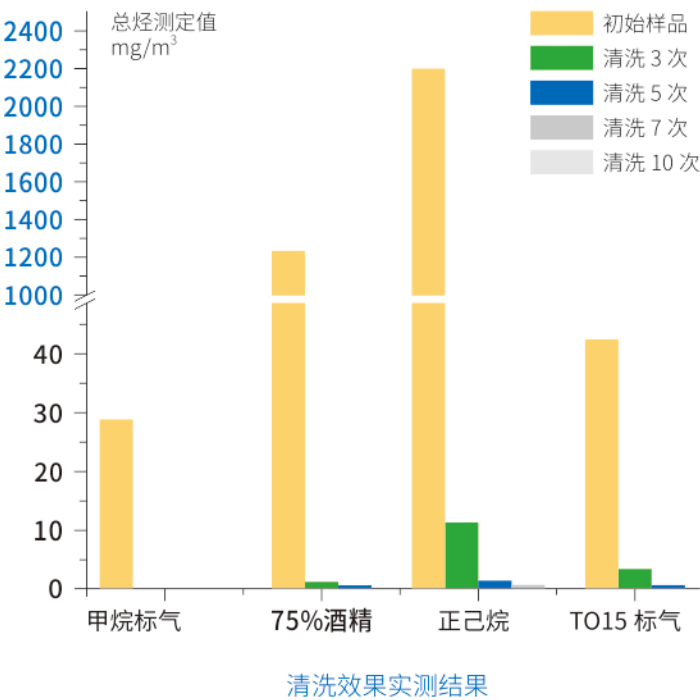

一键式启动，智能监控

- 用户仅需装卸气袋和一键启动，无需其余操作。
- 方法固化，简单、高效、实用：ABC620气袋泄露检测提示，能够及时提示气袋是否泄露；气袋压力自动控制，避免气袋胀裂。
- 智能化加热控温。
- 可通过状态灯随时观察仪器运行状态。